


# AS-35900 - Controlador de puertos 3.0

AS-35900 (Carousel Port 4.0 - Port Controller 3.0)

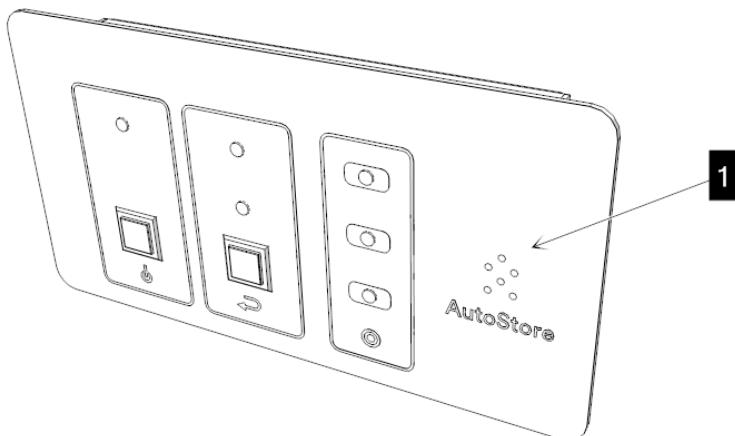

Description	BOM ID	Qty
AS30173 Port Controller 3.0	1	1

Tiempo estimado: 3 minutos

Herramientas necesarias:

Llave inglesa (10 mm)


Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

# Quitar AS-35900 - Port Controller 3.0


Procedimiento:

1. Empuje el brazo de carrusel 4.0 (1) hacia el lado izquierdo, como se muestra en el dibujo, para acceder al controlador de puerto AS-30173 3.0.

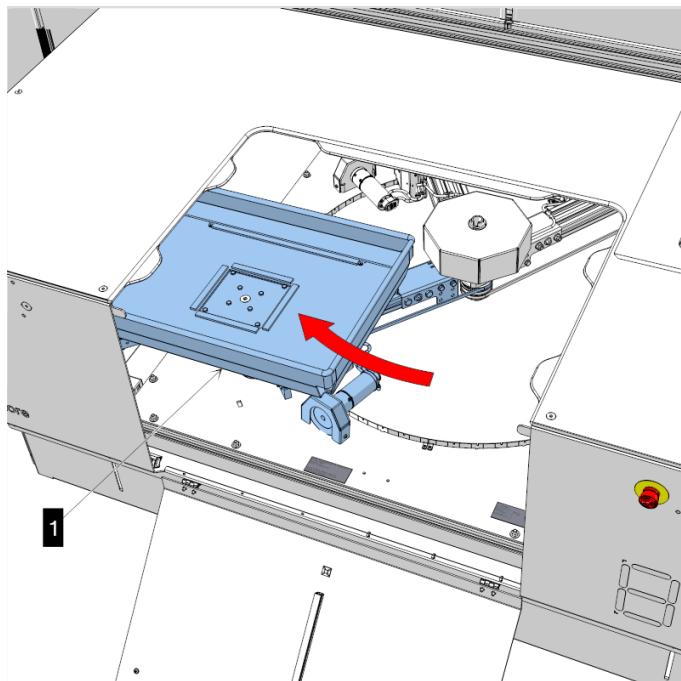


2. Desde el controlador de puerto AS-30173 3.0 (1) desconecte:


- a. AS-16863 Puerto de carrusel 4.0 - Cable, controlador de puerto a interfaz (2)
- b. Cable Ethernet (3)

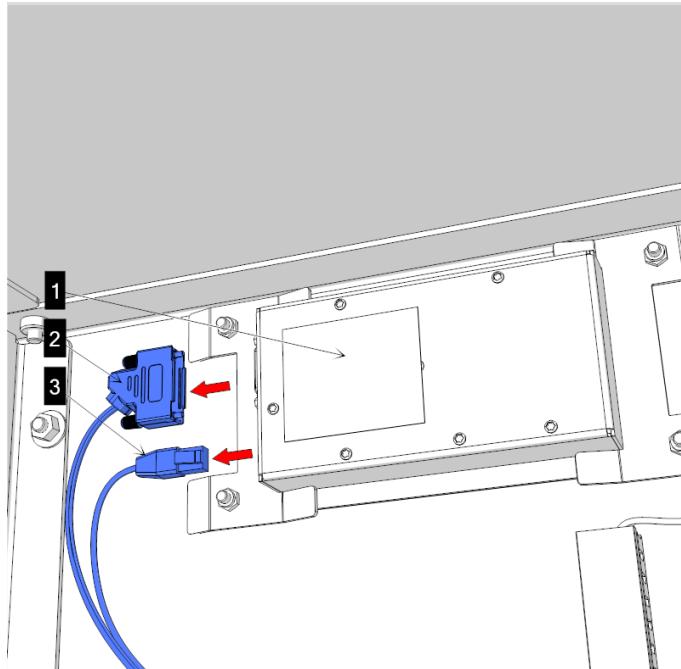

- 
3. Retire las tuercas AS-10900  
(1) [x4] para desmontar los  
soportes del controlador AS-  
16962 (2) [x2] del controlador  
de puerto AS-30173 3.0 (3).

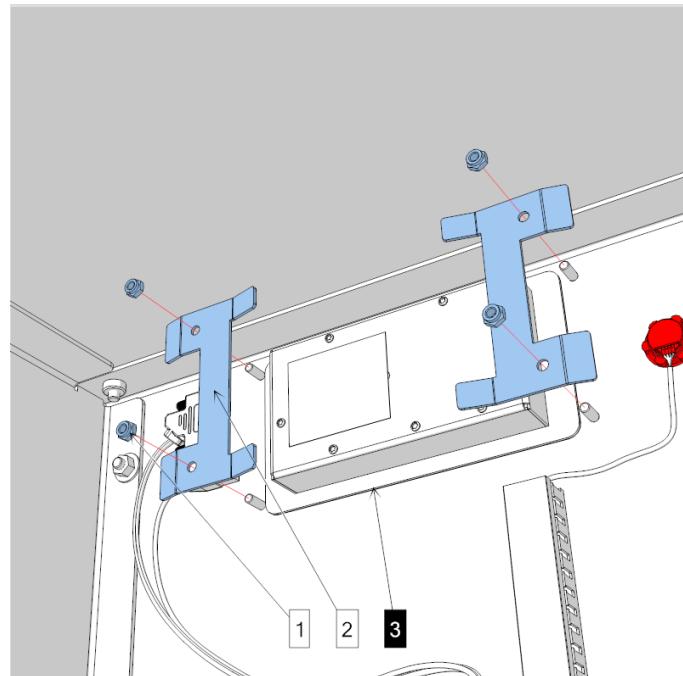

- 
4. Retire el controlador de  
puerto AS-30173 3.0.

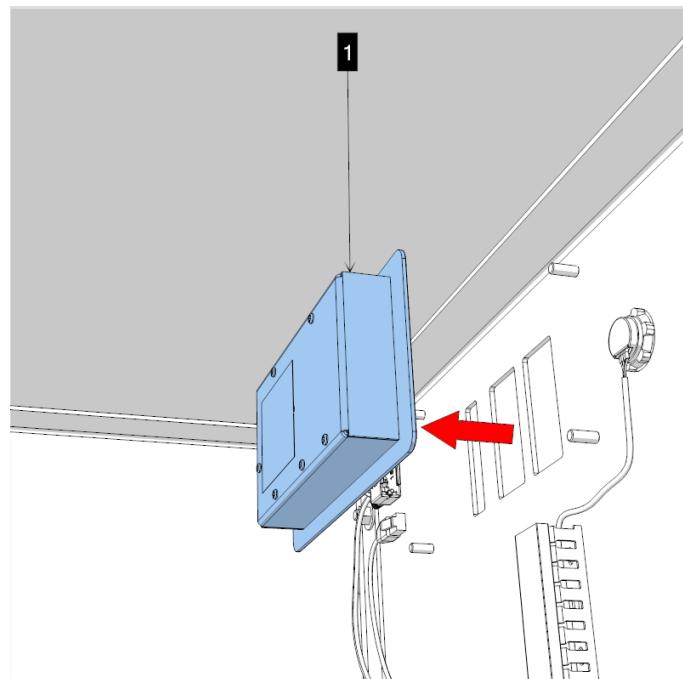


---

## Instalar AS-35900 - Controlador de puerto 3.0


---

Procedimiento:

1. Inserte el kit de servicio AS-35900 que contiene el nuevo controlador de puerto AS-30173 3.0 (1).

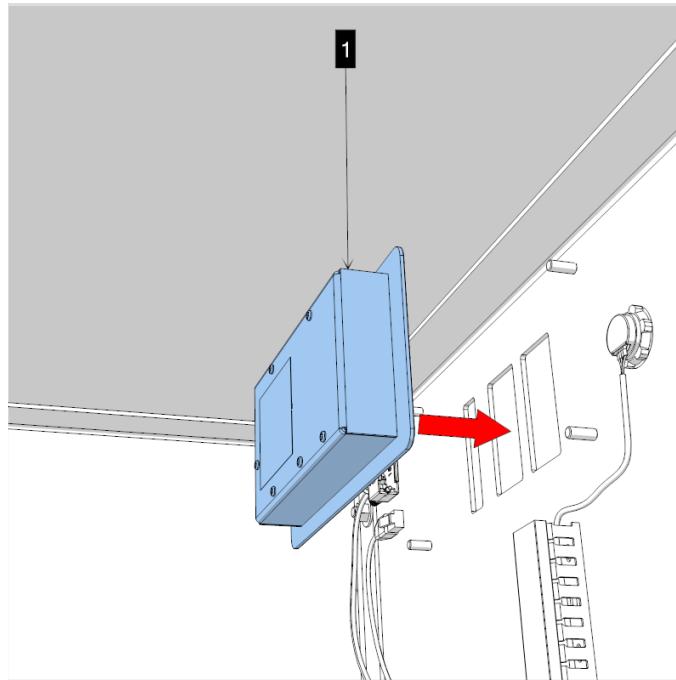

2. Apriete las tuercas AS-10900 (1) [x4] para montar los soportes del controlador AS-16962 (2) [x2] en la parte posterior del controlador de puerto AS-30173 3.0 (3).

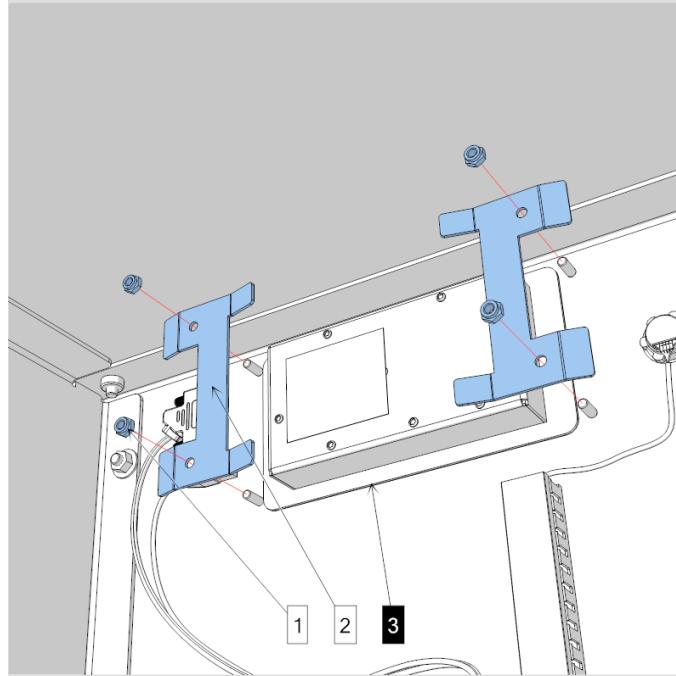


3. Conecte los siguientes cables al controlador de puerto AS-30173 3.0 (1):

- a. AS-16863 Puerto de carrusel 4.0 - Cable, controlador de puerto a interfaz (2)
- b. Cable Ethernet (3)



#### Nota

Asegúrese de que las conexiones estén firmes.

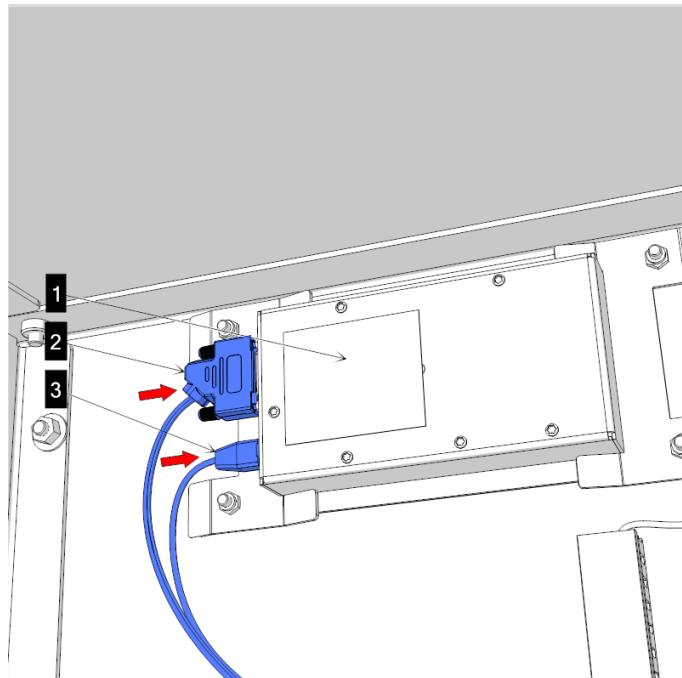

4. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hasta la abertura delantera del carrusel del puerto 4.0.

