

AS-35053 (Kit de pie amortiguador)



Retire AS-35053 (Kit de pie amortiguador)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 3 mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 7 mm

Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Quitar AS-35012 (Hoja derecha)[as-35012-r5---as-35943-r5---sheet-right-.html#UUID-4a74965f-f8e8-94be-875d-def38189c946_UUID-26b3d846-4d07-4a61-998c-ccafd5b19d1e]
- Quitar AS-35013 (Hoja izquierda)[as-35013-r5---as-35944-r5---sheet-left-.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d_UUID-9cf8dd0f-6f60-698e-6f1e-7a681d98068c]


Procedimiento:




Nota

Hay un kit de pie amortiguador a cada lado del robot.

1. Afloje el pie amortiguador con la mano.

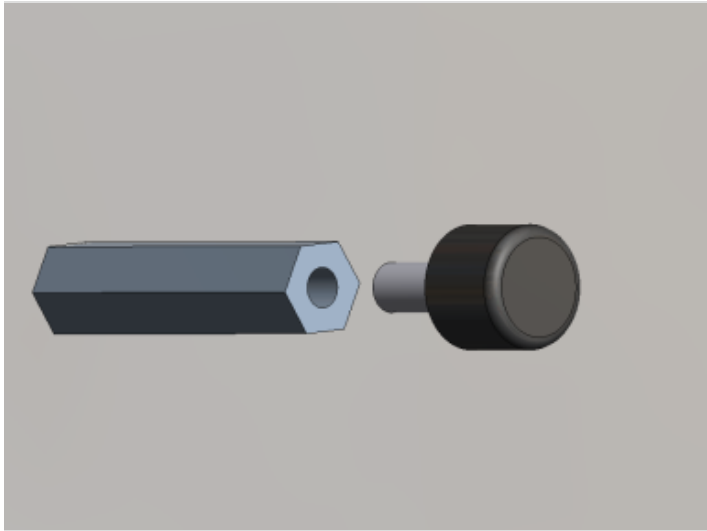

2. Afloje los espaciadores hexagonales m4x30mm (llave de 7mm)

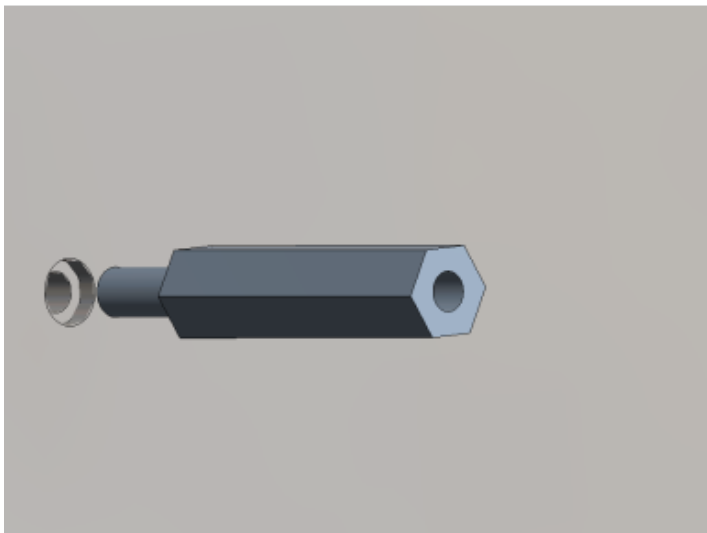

Instalar AS-35053 (Kit de pie amortiguador)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 3 mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 7 mm


Procedimiento:




Nota

Hay un kit de pie amortiguador a cada lado del robot.

1. Apriete los espaciadores hexagonales m4x30mm (llave de 7mm)

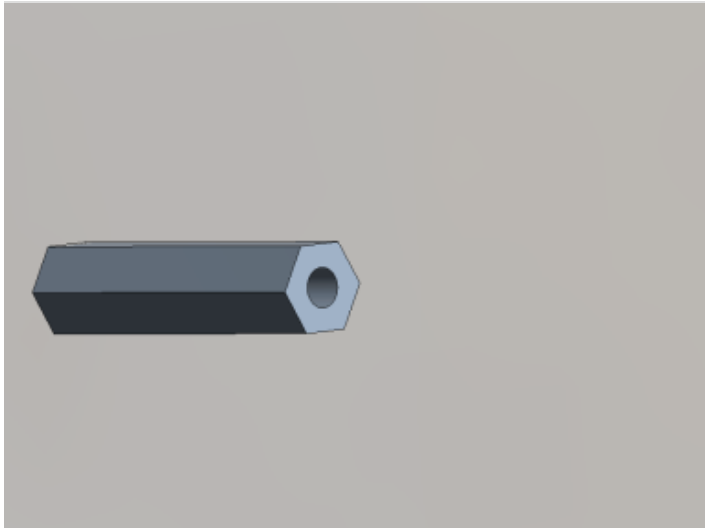

2. Apriete el pie amortiguador con la mano.

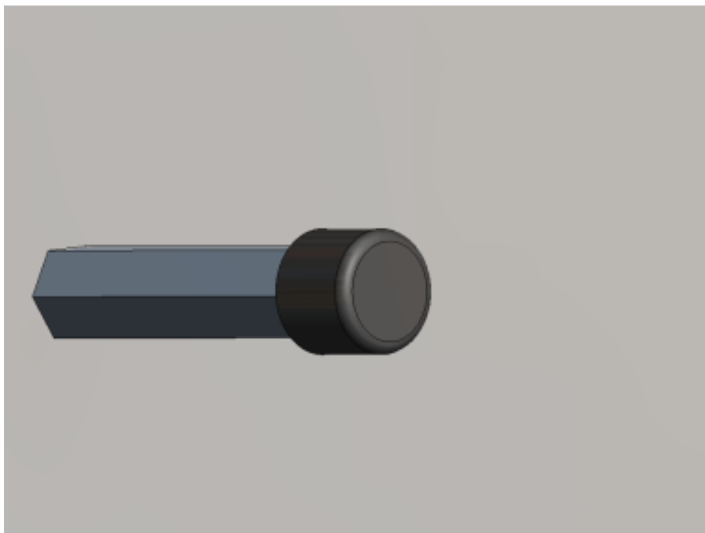**Terminación:**

- Instalar AS-35013 (Hoja izquierda)[as-35013--r5---as-35944--r5---sheet-left-.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d_UUID-0fe7a960-8e1c-0cd9-efcc-6732da1ec22c]
- Instalar AS-35012 (Hoja derecha)[as-35012--r5---as-35943--r5---sheet-right-.html#UUID-4a74965f-f8e8-94be-875d-def38189c946_UUID-480c2c2e-1e84-e9cc-5cf3-285e92b3e32b]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]